

Matériel pour la DISSOLUTION

Préparer une solution à partir d'un soluté solide (ex. sel, soude en pastilles)



Balance électronique

Peser avec précision la masse du soluté solide à dissoudre.



Verre de montre

Recevoir le solide au moment de la pesée, sans le déposer directement sur le plateau de la balance.




Spatule

Prélever le solide (poudre, pastille) et le transférer sans le toucher avec les mains.



Bécher

Dissoudre le solide dans un peu d'eau distillée avant de transvaser dans la fiole.

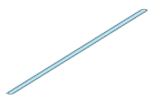


Baguette en verre (agitateur)

Remuer le mélange pour accélérer et homogénéiser la dissolution du solide.



Entonnoir

Verser le mélange dans la fiole jaugée sans en perdre une seule goutte.

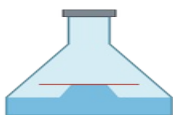

Fiole jaugée

Obtenir un volume exact de solution, ajusté au trait de jauge.




Pissette d'eau distillée

Rincer le bécher, la baguette et l'entonnoir, puis compléter le volume jusqu'au trait de jauge.


Matériel pour la DILUTION

Préparer une solution moins concentrée à partir d'une solution mère déjà existante

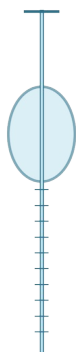

Pipette jaugée (ou graduée)

Prélever un volume précis de la solution mère (la plus concentrée).

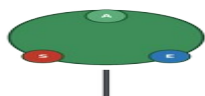

Propipette (poire d'aspiration)

Aspirer le liquide dans la pipette, jamais à la bouche.



Bécher

Recevoir provisoirement le volume de solution mère prélevé.



Fliale jaugée

Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge pour obtenir le volume final de la solution diluée.



Pissette d'eau distillée

Compléter précisément le volume jusqu'au trait de jauge de la fiole.
